

MiroValve®

Por cuánto tiempo puede ser usado MiroValve® y/o cuáles intervalos de cambio son recomendados?

La duración de uso está determinada en principio por el médico tratante. La experiencia nos muestra que es recomendable cambiar el MiroValve® junto con el catéter Foley (uretral) o suprapúbico al mismo tiempo. MiroValve® es un dispositivo médico de un solo uso así como el catéter. Si no es dirigido por el médico tratante, es recomendable cambiar el MiroValve® cada 3-5 semanas aproximadamente.

Cómo debe ser limpiado o desinfectado MiroValve®?


La limpieza y desinfección del MiroValve® es simple y fácil de hacer. En las instrucciones de operación, que están anexas a cada válvula, está descrita la limpieza y desinfección.

El procedimiento es el siguiente:

Sujete firmemente la válvula por el extremo anterior (5) y extraiga la conexión a la válvula (6) de su extremo anterior (5). La válvula se cierra automáticamente.

El MiroValve® puede limpiarse simplemente con agua y jabón, o también puede usarse un desinfectante clínico en aerosol. Si usa este desinfectante: Rocíe el extremo anterior de la válvula (5) con el desinfectante y déjelo actuar. Siga las instrucciones de uso del desinfectante. No salpique jamás los ojos, ni los genitales con soluciones desinfectantes alcohólicas. De suceder esto, lave con abundante agua y consulte de inmediato al médico.

Para minimizar el riesgo de una infección microbiana, procure separar el extremo cónico de la válvula (3) del conector en embudo con la menor frecuencia posible. Se recomienda llevar guantes puestos al desinfectar la válvula y utilizarlos sólo para esto.

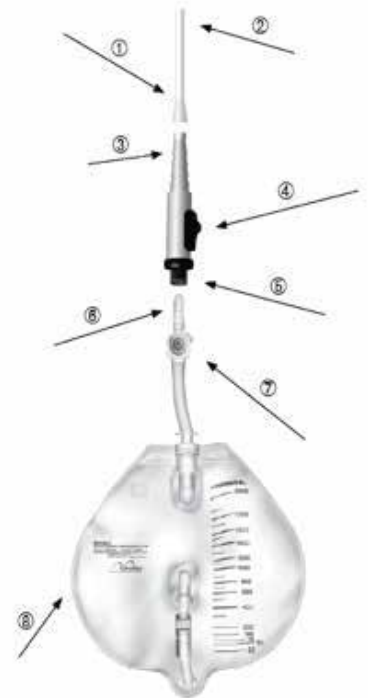

Cómo debe ser la higiene personal?

El paciente, cuidador o enfermera deben lavar el área donde el catéter se inserta cada día. Debe evitarse el uso de cremas y talco alrededor del área. El paciente puede bañarse con la válvula en su lugar. El paciente debe hidratarse lo suficiente, de acuerdo a la recomendación del doctor.

Con cuál desinfectante puede MiroValve® ser desinfectado?

Esto depende en principio del área designada de uso del rociador desinfectante/antiséptico, determinado por la compañía fabricante, en relación con los campos de uso certificados para el desinfectante en particular. Por favor contactar al fabricante del desinfectante de su elección.

MiroValve®

Es permitida una desconexión?

Esto es una discusión controvertida entre expertos. Hay voces que hacen referencia a las directrices del Instituto Robert Koch (RKI), las cuales no recomiendan una desconexión dentro de sistemas cerrados. Otros especialistas comparten la opinión que la desconexión tiene sentido cuando referencias de desinfección son consideradas en orden de aumentar la comodidad del paciente y cambiar sus circunstancias de vida a algo mejor.

Lo que se ha notado es que los usuarios diarios de productos de incontinencia se desconectan regularmente. Para pacientes con incontinencia móvil el uso de una bolsa de orina no está siempre indicado. Un tiempo sin bolsa, puede incrementar la comodidad del paciente sustancialmente.

Esto presupone, sin embargo, la atención de directrices de operación/desinfección estéril con la conexión y desconexión a y desde el MiroValve®. Las instrucciones de operación se refieren a esto consecuentemente (rociador antiséptico y guantes de examen tienen que ser usados cuando es realizada la conexión y desconexión).

MiroValve® previene infecciones?

No. MiroValve® está diseñado para incrementar la comodidad del paciente, cierra el aire y es a prueba de líquidos. Debido a su diseño, y por razones técnicas un filtro seguro de bacterias no tendría sentido. Las directrices de desinfección deben ser siempre consideradas antes y durante el uso. Ninguna garantía puede ser dada en cuanto a que las infecciones son prevenidas. Sin embargo, tampoco hay garantía con el uso de toques de catéter u otras válvulas de catéter.

Bajo la consideración de riesgo y beneficio para el paciente, el médico tendrá que decidir si una válvula de catéter MiroValve® puede ser usada en casos individuales o no.

* La información anterior constituye solo recomendaciones del fabricante, no vinculantes legales. Para instrucciones específicas de uso del dispositivo MiroValve®, por favor referirse a su médico tratante.



Calle 120ª #7-36 Of.801
Bogotá-Colombia
Teléfonos: (1) 7364342/43
Celular: 316-8570820
www.plamatech.com